



# 牛乳と乳飲料に含まれる カルシウム濃度測定

LAQUAtwinはHORIBAの水質分析技術とノウハウを生かしたコンパクト水質計シリーズです。 pHに加え、電気伝導率(導電率)、塩分、イオン(Na+、K+、NO $_3$ -、Ca²+)の計7種を用途に合わせて ラインアップしています。サンプルがわずかな量であっても独自の平面センサにより、誰でも、どこでも、素早く、簡単に水質測定を実現できます。







# 用途事例

通常、牛乳と乳飲料の品質管理において、カルシウムの含有量は、原子吸光分析(AA)や誘導結合プラズマ発光分光分析(ICP)を用いて測定されます。一方で、イオンメータでは検出されないサンプル中のタンパク質結合性カルシウムを前処理操作でイオン化することによって、LAQUAtwinカルシウムイオンメータによる総カルシウム量の簡易測定が可能になります。これは、乳製品中のカルシウム含有量を簡易・迅速に確認したい場合に有用な測定方法です。

# 測定手順

# 前処理手順(牛乳の場合)

- 塩酸で牛乳のPHが4.3~4.6の間になるように調整します(LAQUAtwin pHメータで測定可能)。
- 2.試料の沈殿を待ち、上澄み液(サンプル)を採取します。
- 3.採取したサンプルをセンサ上に滴下し、測定します。
- 4.繰り返し測定する場合には、希釈した中性洗剤などでセンサ表面を洗浄し、 柔らかいもので拭き取った後、軽く乾かしてください。

### 前処理手順(乳飲料の場合)


- 塩酸で乳飲料のpHが2.0となるように調整します(LAQUAtwinpHメータで測定可能)。
- 2.試料がpH4.3~4.6となるようにトリス-ヒドロキシ-アミノメタンを添加してください。
- 3. 試料の沈殿を待ち、上澄み液(サンプル)を採取します。
- 4.繰り返し測定する場合には、希釈した中性洗剤などでセンサ表面を洗浄し、 柔らかいもので拭き取った後、軽く乾かしてください。

# 結果と効果

乳製品の品質とカルシウム含有量の管理は、消費者に安心できる商品と正確な情報を提供できます。また、正確なカルシウム含有値は、乳糖不耐症の人にとって有益な情報となります。

LAQUAtwinカルシウムイオンメータはコンパクト設計です。現場へ持ち運び易いだけでなく、シンプルな構造と使いやすいインターフェイスは、使い手を選ばない測定を実現します。

### LAQUAtwinと他の測定方法によるカルシウム濃度の相関図

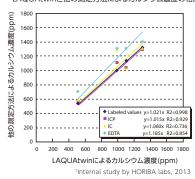



# ■ LAQUAtwinのユニークな特徴

### 独自の平面センサ技術

HORIBAの高感度のフラットセンサ技術は、サンプリングとサンプルの新しい可能性を開拓します。わずかなサンプル量で済み、 ビーカやラボ用器具を必要とすることなく、簡単にサンプリングが可能です。センサ部分の交換も簡単に行えます。

### 校正も、測定も、ボタンを押すだけ。測定完了は安定マークでお知らせします。

数滴の標準液と手間いらずの自動校正機能で、測定の精度を保証します。

### LAQUAtwinは防水・防塵構造※です。

防水・防塵構造なので、どこへでも持ち運び可能です。

※ IP67相当:水深1mにおいて30分間浸漬させても故障しません。水中では使用できません。

### 便利な携帯性を備えた専用ケース

ケースには測定に欠かせない標準液やサンプリングシートが付属しています。

# ■一つのセンサに6種類の測定方法があります。

LAQUAtwinなら柔軟な選択が可能です。サンプル、測定環境、必要性によって一番良い方法を選択してください。



#### 浸ける

実験室で使用するときは、ビーカに直接浸して測定。センサブードのスライドキャッ プは開けておきます。



すくい取る

川などに直接浸けて、そのまますくい取り。ストラップを付 けてぶらさげてもすくえます。



滴下する

スポイトでセンサの上に滴下 して測定。約0.1mL~の微量測定も可能。また、サンプリングシートBを使えば、より 少ないサンプル量(0.05mL) から測定できます。



固形物

食品などの水分のある固形 物は小さく切ってセンサの上 に直接のせて測定できます。



粉末

粉末状のものはセンサの上 にのせ、純水を一定量滴下し てください。



ト状

紙や布などは小さく切って、センサに直接のせて測定できま す。純水を一定量滴下してく

# ■ 測定対象に合わせてLAQUAtwinをお選びください。

液体はもちろん、固形物、粉末、シート状のサンプルまで多彩に測れます。 測定項目もpH、電気伝導率(導電率)、イオン、塩分から選べる7種類。 あなたにぴったりのLAQUAtwinが見つかります。

# pH



## マー×Ha

・ 特長: 約0.1mLから測定可能な使いやすさを追求したpHメータ。

温度補償付平面センサで信頼性の高い測定が可能。 用途: 熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸 造・化学・薬品・学校教育など





# 雷気伝導率計(遵雷率計, FC)

特長: 電気伝導率に加え、TDS換算測定も可能。自動レンジ切 替えでワイド測定レンジを実現。

用途: 雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など



特長: イオン電極法\*1による信頼性の高いイオン測定を平面セン サに演下するだけの簡単操作を実現。

用途: 健康管理・食品工程管理・環境測定塩害対策など



特長: イオン電極法\*1による信頼性の高いイオン測定を平面セン サに滴下するだけの簡単操作を実現。

用途: 土壌・栽培管理・食品・健康管理など

# $NO_3$



特長: イオン電極法\*1により、信頼性の高いイオン測定が可能。 作物専用・土壌専用製品もご用意。

用途: 土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など







特長: イオン電極法\*1により、イオン化カルシウム\*2の測定が可能。 用途: 土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川、湖 沼の硬度測定など

# Salt 塩分計



特長: ナトリウムイオンに応答し、より確かな食塩(NaCI)濃度が 測定可能。

用途: 食品・健康管理・食品の工程管理、食事指導など

※1 試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります。 妨害イオンについては、別途お問い合わせください。 ※2 全カルシウム濃度の測定には前処理が必要な場合があります。

〈製造・販売元〉

# **HORIBA** Advanced Techno

株式会社 堀場アドバンスドテクノ http://www.horiba-adt.jp

本社/〒601-8306 京都市南区吉祥院宮の西町31番地 TEL(075)321-7184 FAX(075)321-7291



http://www.horiba.com/laquatwin

