

医薬・食品・バイオ製造プロセス用 水質計測器



EC 低濃度電気伝導率計
HE-960CW



EC 低濃度電気伝導率計
HE-200C/HE-200C-WI



EC 低濃度電気伝導率計
HE-300C-IS



RC 残留塩素計
HR-200/HR-200-WI



RC 残留塩素計
HR-480



TOC 計
HT-100




TOC 計
HT-110



製薬用水プロセス


PW(精製水)製造装置

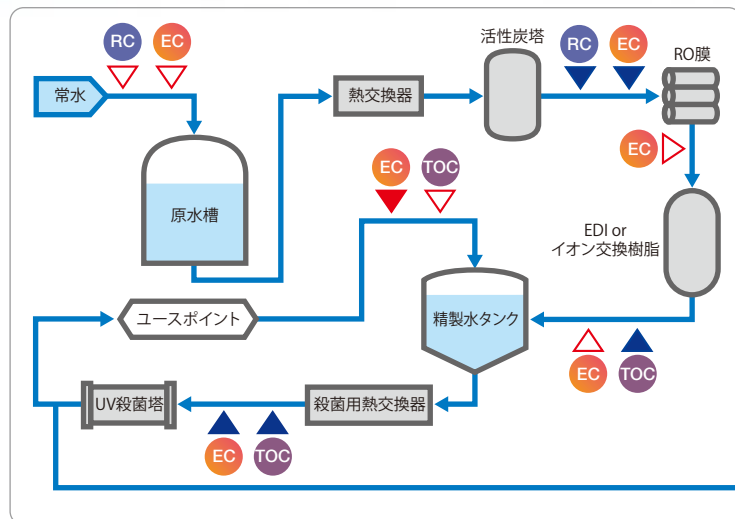

計測器の設置箇所


▼ 最重要箇所 ▼ 重要箇所 ▲ 理想箇所

WFI(注射用水)製造装置

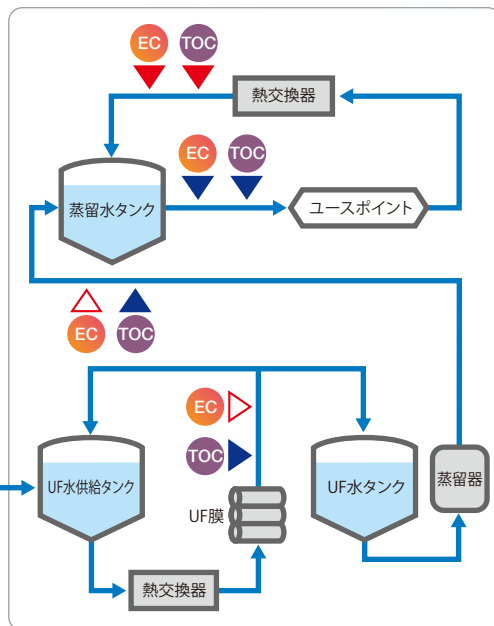


バイオ・食品プロセス


発 酵

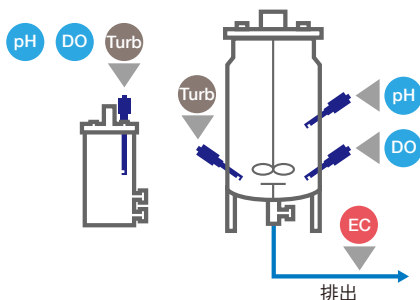


遠心分離

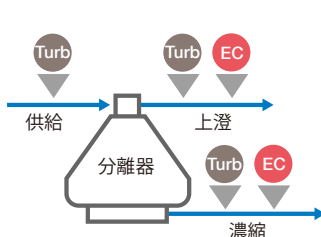


限外ろ過

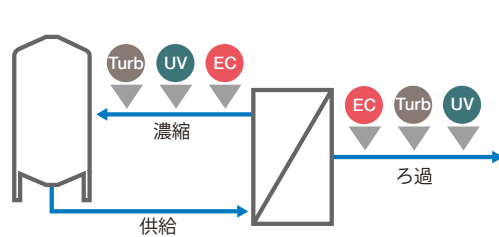

クロマトグラフィー

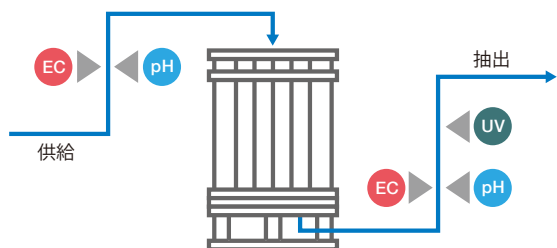


配合と充填

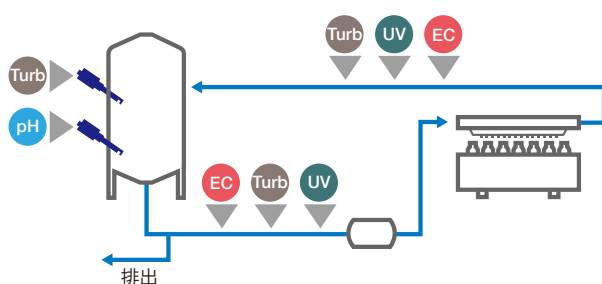




CIP洗浄プロセス

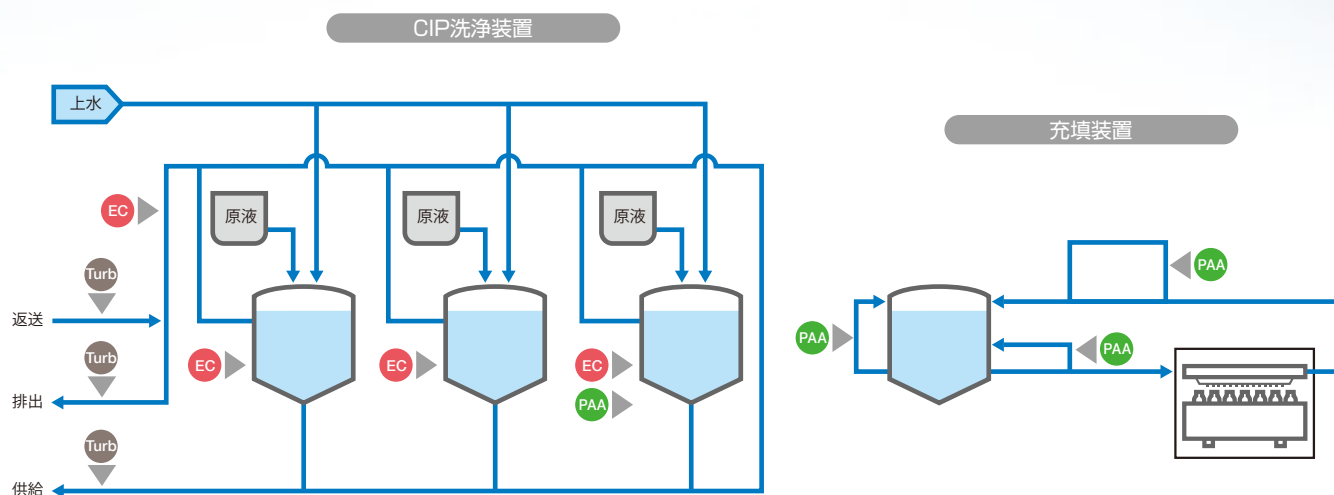

H-1Linkシステム構成

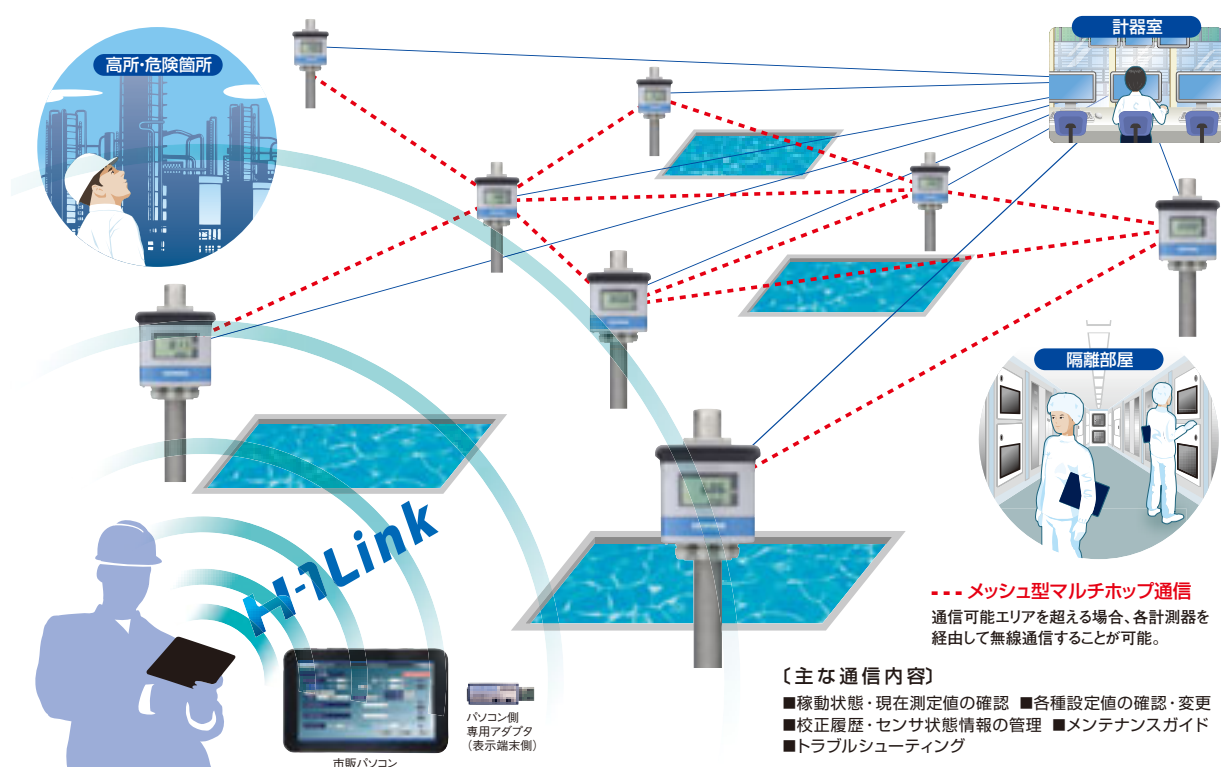

飲料・食品プロセスの殺菌に用いられている過酢酸濃度の連続測定に最適です。

過酢酸濃度モニタ

■100～4000ppmの濃度範囲で測定が可能。 ■4～20mA出力とRS-485通信を搭載。

過酢酸濃度モニタ PM-960



品名	過酢酸濃度モニタ
形式	PM-960
温度センサ仕様	測温抵抗体：1000Ω（0℃）
測定範囲	100～4000ppm（0.010～0.400％）
繰返し性	±100ppm
伝送出力	出力点数：2点、DC4～20mA
接点出力	出力点数：5点（警報出力1点含む）
接点入力	入力点数：1点（外部HOLD機能）
通信入出力	RS-485
自己診断機能	校正エラー（ゼロ校正）、温度センサ診断（温度センサ短絡、断線）、変換器異常
電源	DC24V±10％（最大15W）
構造	パネル取付屋内設置型、パネル部：IP65
対応規格	CEマーキング、FCC規則：part15

■試薬を使用せず連続測定が可能。 ■センサ交換が簡単（顧客で実施可能）

過酢酸濃度モニタ用センサユニット/センサ PM-100/#5800



品名	過酢酸濃度モニタ用センサユニット/センサ
形式	PM-100/#5800
測定方式	電気化学測定法
測定対象	過酢酸（CH ₃ COOOH、Peracetic acid）
検水条件 温度	0～45℃（凍結なきこと）
検水条件 流量	500～2000mL/min *供給流量が低下すると応答速度が遅くなる場合があります。
検水条件 圧力	0.1MPa以下（一定） *試料圧力変動がある場合指示値に影響がでます。
応答性	センサユニットへの供給開始後 T90<5min
繰返し性	±100ppm
周囲温度	0～45℃
接液部材	PVC、PTFE、Silicon、PPO、OPP
内部液	中性リン酸塩（食品添加物）
ケーブル長	標準付属ケーブル：5m 最大延長距離：50mまで

*本製品は医療機器用途にはお使いいただけません。

各国の薬局方に対応しており、製薬用水設備のTOC管理に最適です。

TOC計(全有機炭素計)

■USP (643)・EP (2.2.44・WATER FOR INJECTION・WATER、HIGHLY PURIFIED・WATER、PURIFIED)・JP (4.5.2)に対応 ■測定に試薬やキャリアガス不要なUV酸化導電率法を採用

全有機炭素計 HT-100

- プロセス圧の変動に指示影響を受けることのないサンプリングポンプ内蔵構造



全有機炭素計 HT-110

- 1年間ノーメンテナンスを実現
- 外部制御により測定の運転・停止を制御可能



品名	TOC計(全有機炭素計)	
形式	HT-100	HT-110
測定方式	連続UV酸化導電率方式	
測定範囲	0.0～1000ppb	
測定レンジ	0～100/500/1000ppb	
繰り返し性	±2％フルスケール以内	
表示分解能	0.1ppb（0～100ppb/0～500ppbレンジ）、1ppb（0～1000ppbレンジ）	
伝送出力	出力点数：1点、DC4～20mA、DC0-1V（オプション）	
接点出力	出力点数：2点（警報接点出力）	
接点入力	—	入力点数：1点（接点機能：測定停止）
試料水条件	導電率：<10μS/cm以下（0-100ppbレンジのときは<2μS/cm以下）、温度：5～99℃、圧力：0.03～0.50MPa（HT-110は±0.05MPa以内）、流量：20～200mL/min	
設置条件	屋内設置型	
電源	定格電圧AC100～240V、50/60Hz、80VA（max）	
対応規格	CEマーキング、FCC規則：part 15	

低濃度電気伝導率(導電率)計

工業用2チャンネル電気伝導率計 HE-960CW

- 



※1サニタリーセンサ(FS-01FCシリーズ)のみ適用

フロースルーセンサ
FS-01FC-SL-X

- 
- 1/2インチ型ストレート構造

挿入型センサ
ESH-01C-S-SN-XS


- 
- ESH-01-C-S-SN-1.5S

濁度計・UV計・色度計

センサ



コンバータ
C4000

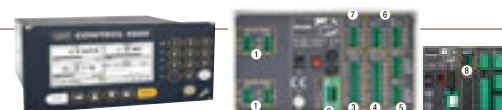[illegible]

pH計・DO計

センサ	アナログ			デジタル (Memosens)	
	pH:SE 555	DO:SE 706	光学式DO:SE 740	pH:SE 555MS	DO:SE 706MS
	レンジ:0~14pH 殺菌:CIP/SIP/ オートクレーブ可 長さ:120mm/225mm 接続:VP,S8 圧力:-1~6bars 温度:0~135℃	レンジ:pO2<1200mbar 殺菌:CIP/SIP/ オートクレーブ可 長さ:120mm/220mm 接続:VP 圧力:0.2~6bars 温度:0~80℃ 耐圧:最大12bar 耐温:-5~140℃ 表面処理:Ra<0.4μm	レンジ:4ppb / 0.05 ... 300% 殺菌:CIP/SIP/ オートクレーブ可 長さ:120mm/220mm/ 325mm/425mm 接続:M12 温度:0~80℃ 耐圧:最大12bar 耐温:-10~130℃ 表面処理:Ra<0.4μm	レンジ:0~14pH 殺菌:CIP/SIP/ オートクレーブ可 長さ:125mm/225mm/ 325mm/425mm 接続:Memosens 圧力:-1~6bars 温度:0~135℃	レンジ:pO2<1200mbar 殺菌:CIP/SIP/ オートクレーブ可 長さ:120mm/220mm 接続:Memosens 圧力:0.2~6bars 温度:0~80℃ 耐圧:最大12bar 耐温:-5~140℃ 表面処理:Ra<0.4μm

変換器	Low End					High End (多機能)	
	MemoRail Series	Stratos ECO Series	Stratos MS Series	Stratos EVO Series	Stratos EVO Series	Protos Series	Protos Series
	接続選択:pH/ORP/DO/COND 接続センサ:Memosens 電源:DC24V/AC90~230V 伝送出力:DC4~20mA 伝送出力点数:1or2点 オプション:FDA 21 CFR Part 11対応	接続選択:pH/ORP/DO/COND 接続センサ:アナログ 電源:24~253V AC/DC 伝送出力:DC0/4~20mA 伝送出力点数:2点 警報接点:1点 接点出力:1点 (自己診断機能選択可) 取付:パイプor壁orパネル 保護等級:IP65	接続選択:pH/ORP/DO/COND 接続センサ:Memosens 電源:DC24~60V AC80~230V 伝送出力:DC0/4~20mA 伝送出力点数:2点 (自己診断機能選択可) 警報接点:2点 取付:パイプor壁orパネル 保護等級:IP67 オプション:FDA 21 CFR Part 11対応	接続選択:pH/ORP/DO/COND 接続センサ:アナログ/Memosens 接続ch数:標準 1点/最大 2点(OP) 電源:DC24~60V AC80~230V 伝送出力:DC0/4~20mA 伝送出力点数:2点 警報接点:2点(PID制御可) 接点出力:1点(自己診断機能選択可) 取付:パイプor壁orパネル 保護等級:IP67 オプション:Hart通信/伝送入力/制御入力 FDA 21 CFR Part 11対応	接続選択:pH/ORP/DO/COND 接続センサ:アナログ/Memosens 接続ch数:標準 1点/最大 3点(OP) 電源:24~230V AC/DC 伝送出力:DC0/4~20mA 伝送出力点数:2点 警報接点:4点(自己診断機能選択可) 取付:パイプor壁orパネル 保護等級:IP65 オプション:Profibus PA Foundation Fieldbus/ PID制御	Conformity with FDA 21 CFR Part 11	接続選択:pH/ORP/DO/COND 接続センサ:アナログ/Memosens 接続ch数:標準 1点/最大 3点(OP) 電源:24~230V AC/DC 伝送出力:DC0/4~20mA 伝送出力点数:2点 警報接点:4点(自己診断機能選択可) 取付:パイプor壁orパネル 保護等級:IP65 オプション:Profibus PA Foundation Fieldbus/ PID制御

ホルダ	Inline	Retractable		
	ARI 106/106H Series	WA 131/131H WA 131M/131MH Series	WA 130/130H Series	WA 150/153/154 Series
	接液部材質:PEEK or 1.4435 取合:Ingold 25mm(G 1 1/4)29.0mm or 25mm (G 1 1/4)45.0mm 圧力:-1~10bar 温度:-20~140℃ センサ仕様:PG 13.5/120mm/φ12 殺菌:CIP/SIP可	電極昇降:手動or全自動※ 接液部材質:1.4404 or 1.4571 or Hastelloy or PEEK HD or PVDF HD or PEEK or PVDF or PP or titanium※ 特徴:洗浄/校正用薬液接続用プラグ付き※ 認定:EHEDG※ 取合:Flange or Ingold or Varivent or BioControl or Dairy pipe or Clamp etc ※ 保護等級:IP66 センサ仕様:PG 13.5/φ12/225mm or 250mm 圧力:最大 10bar※ 温度:0~140℃※ 殺菌:CIP/SIP可※ ※仕様により異なる	電極昇降:全自動 接液部材質:1.4404 or 1.4571 or Hastelloy or PEEK HD or PVDF HD or PEEK or PVDF or PP or titanium※ 特徴:洗浄/校正用薬液接続用プラグ付き※ 認定:EHEDG※ 取合:Flange or Ingold or Varivent or BioControl or Dairy pipe or Clamp etc ※ 保護等級:IP66 センサ仕様:PG 13.5/φ12/225mm or 250mm 圧力:最大 10bar※ 温度:0~140℃※ 殺菌:CIP/SIP可※ ※仕様により異なる	接液部材質:1.4404 or 1.4571 or Hastelloy or PEEK or PVDF or titanium※ 特徴:洗浄/校正用薬液接続用プラグ付き※ 取合:Flange or Varivent or BioControl or Dairy pipe or Clamp etc ※ 保護等級:IP66 センサ仕様:PG 13.5/φ12/225mm or 250mm or 425mm or 450mm 圧力:最大 10bar※ 温度:0~140℃※ 殺菌:CIP/SIP可※ ※仕様により異なる

With Protos

自動洗浄 Unclean900	自動洗浄 & 自動校正 Unical9000
	

他メーカー
センサ or 変換器 or ホルダ

