

小さいのにパワフル、 実験室に必要な機能を 厳選した卓上計です。

分解能:0.01/0.001切替式

プリンタと接続可能

2000 メモリ

AC電源駆動

イオン測定機能を標準搭載

卓上pH計のスタンダードモデルに
イオン測定機能を搭載。
複合型イオン電極^{※1}と組み合わせて、
イオン測定をより身近に。

イオン電極の
詳細はこちら▼



文字が見やすい!大画面表示

文字サイズを25%アップ^{※2}。さらにバックライトを搭載する
ことで画面の見やすさにもこだわりました。

アイコン表示でわかりやすい

😊で測定値の安定状況を、🔋でセンサの状態をお知らせ。
日々の測定を直感的にわかりやすくサポートします。

コンパクトにスッキリと

設置面積を20%削減^{※3}。出入口ポートはすべて背面に集約され
ているため、ケーブル類をまとめやすく、スマートに測定可能です。

※1 6560S-10C/6561S-10C/6581S-10C/6582S-10C/6583S-10C/5002S-10Cと接続可能。
※2、3 当社従来モデルF-71との比較



F-2000シリーズをもっと詳しく知る▶



NEW

F-2000シリーズ ラインアップ		セット価格 🔌 + 📄 + 📡
1chモデル	CH1 pH ORP イオン	pH電極セット F-2000PI-S ¥185,000 3200919588
F-2000PI F-71 後継モデル 計量法型式承認番号: 第SS212号 単品価格 ¥165,000 3200919586		
2chモデル	CH1 pH ORP イオン CH2 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量	pH電極セット F-2000PC-S ¥300,000 3200919602
F-2000PC F-74BW 後継モデル 計量法型式承認番号: 第SS212号 単品価格 ¥280,000 3200919599		
1chモデル	CH1 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量	スタンダード電気伝導率セルセット F-2000C-E ¥200,000 3200919631
F-2000C DS-71 後継モデル 単品価格 ¥165,000 3200919610		

他にも豊富なセットをご用意しています。詳細はお問い合わせ下さい。 ※記載価格は希望販売価格(税抜)です。


	JIS形式	JIS形式I
pH	測定範囲(表示範囲)	pH 0.000 ~ 14.000 (pH -2.000 ~ 20.000)
	計器再現性(精度)	±0.005 pH ±1 digit
	分解能	0.01 / 0.001 pH
温度	測定範囲(表示範囲)	0.0 °C ~ 100.0 °C (-30.0 °C ~ 130.0 °C)
	測定・表示範囲	0.000 µg/L ~ 9999 g/L
イオン	計器再現性(精度)	±0.5% F.S. または ±0.2 mV の大きい方
	測定範囲	0.000 µS/cm ~ 2.000 S/cm ^{※1}
電気伝導率	計器再現性(精度)	各レンジのフルスケールの±0.6% ただし、18 mS/cm 以上: フルスケールの1.6%
	データメモリ	2000 件
	PC 接続	あり(USB 通信ケーブル必要)
	プリンタ出力	あり(GLP, GMP 対応)
	外形寸法 / 質量	160 (L) × 150 (W) × 66 (H) mm / 約770 g

※1 使用する電極により測定範囲は異なります。

さらに多様なラインアップ ぴったりの水質計を 見つけましょう。

ラクア
LAQUA

pH・水質計ラインアップ

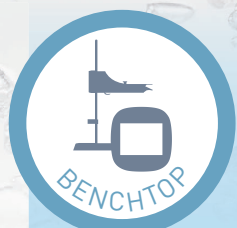

卓上型

F-2000/F-70/DS-70 シリーズ

実験室・分析室で精度の高い測定に。
校正アシストなど正しく測定するための
機能を搭載し、日々の測定に必要な
すべてをこの1台でお届けします。

pH ORP イオン 電気伝導率
電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量

モノクロ液晶
タイプ ¥165,000～
カラー液晶
タッチパネル
タイプ ¥210,000～

詳しくはこちら▼



ポータブル型

D-200/WQ-300 シリーズ

衝撃に強く、片手で持ちやすい本体で
測定場所を選ばずタフに測定できます。
電極スタンドと組み合わせて卓上での
利用も可能。

pH ORP イオン 電気伝導率
電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量 溶存酸素

スタンダード
タイプ ¥55,000～
マルチ
デジタル
タイプ ¥79,000～

詳しくはこちら▼



コンパクト型

ポケットサイズで簡単操作!
HORIBA独自の平面センサ技術で、
約0.1mLからの微量測定を実現。
7成分のラインアップで、
用途に応じて多彩に
測定可能です。

pH 電気伝導率 全溶存固形物量
ナトリウムイオン カリウムイオン 硝酸イオン
カルシウムイオン 塩分濃度

¥22,000～

詳しくはこちら▼



電極・その他アクセサリ

サンプルに応じた
豊富な電極ラインアップ!
粘性の高いサンプルや非水サンプル、
微量測定に対応する各種電極から
最適な1本をお選びください。

pH ORP イオン 電気伝導率
電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量 溶存酸素

その他アクセサリも充実

詳しくはこちら▼



冊子カタログもご用意しております



<memo>

株式会社堀場アドバンスドテクノ

〒601-8551 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-321-7184
http://www.horiba-adt.jp

東 北 022-776-8253 東 京 03-6206-4751 名古屋 052-937-0812
大 阪 06-6390-8211 九 州 092-292-3595

●製品の技術的なご相談を受けします。 カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル **0120-37-6045**

受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00

【祝祭日を除く月曜日～金曜日】

※携帯電話・PHSからでもご利用可能です。

※一部のIP電話からご利用できない場合がございます。